

## **EvoControl 200**

1. **АРТИКУЛЫ:** 142854 (23см x 23см), 142855 (30,5см x 30,5см)

2. **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**


Салфетка для уборки в Чистых Помещениях, произведенная по технологии Evolon

3. **СОСТАВ:**

Микроволокно: 70% Полиэстер / 30% Полиамид

4. **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	<b>Характерное значение</b>
Плотность	60 гр./м <sup>2</sup>
Впитывающая способность	210 мл/м <sup>2</sup>
Скорость впитывания	≤ 1 сек.

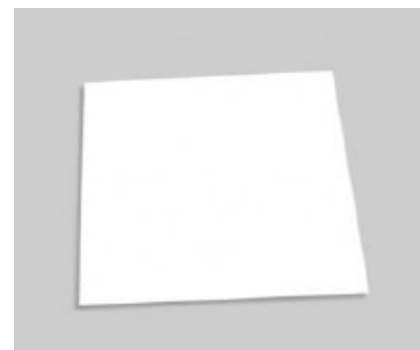

5. **ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ЧАСТИЦЫ** (характерные значения)

	<b>Характерное значение</b>	<b>Показатель</b>
Количество жидких частиц (≥ 0,5 μm)	80	6 10 частиц/м <sup>2</sup>

6. **НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА**

- Сделана из очень тонкого микроволокна (0,15 дтекс) для лучшего удаления загрязнений
- Не скатывается и обладает высокой прочностью на разрыв из-за замкнутой конструкции микроволокна
- Кромка салфетки герметизирована посредством лазерного разрезания
- Запакованы в Чистых Помещениях класса ISO 4-5
- Высокая устойчивость к алкоголю и общепринятым дезинфектантам
- Для целей общей уборки

**Сфера применения**

**Чистые (стерильные) помещения:** ISO 6-9 / GMP class C

**Хранение, Транспортировка и Утилизация**

В паллетизированном виде хранить в холодном и сухом месте. Не выставлять под действие прямых солнечных лучей. Продукт не является предметом особого регулирования при транспортировке и не относится к опасным веществам. Утилизация посредством закапывания или сжигания допускается.